


## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Grafische Meldungsanzeige
ARTIKEL:	300907
TYPE:	SOFT-STATIONSPLAN
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

Bild:

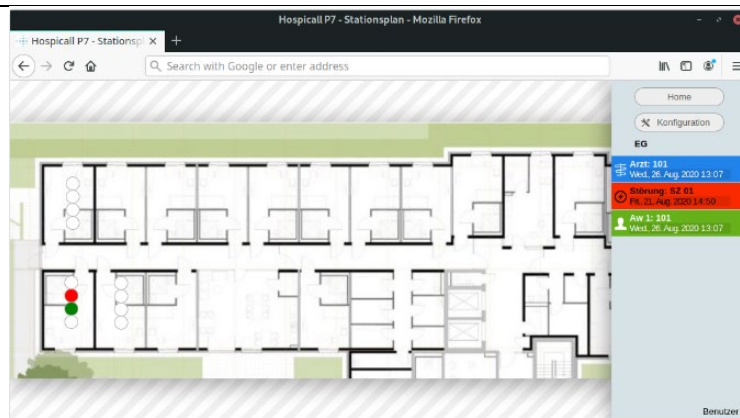

### BESCHREIBUNG:

Bei der grafischen Meldungsanzeige handelt es sich um eine Software, mit der Rufsignale optisch auf einem am Bildschirm abgebildeten Stationsplan, dargestellt werden können. Stammen Rufsignale aus einer anderen Etage, kann auf der Anzeige in die jeweilige Etage oder Station gewechselt werden. Diese verschafft einen besseren Überblick über die verschiedenen Stationen und Etagen. Bei vorhanden sein eines sprachfähigen Dienstzimmerterminals, können die Rufe mit Sprache angenommen bzw. beantwortet werden. Sollten Rufe einem Ursprungsort nicht zugeordnet werden können, wie zum Beispiel Rufe aus externen Systemen, werden diese zusammen mit allen Rufen der Station tabellarisch angezeigt. Das Erscheinungsbild des Stationsplans kann an die jeweiligen Benutzerwünsche, wie zum Beispiel schwarz-weiß-Modus des Grundrissplans oder die Größen- und Formatanpassung der angezeigten Elemente, angepasst werden. Die Anzeige ist nicht kompatibel mit dem Dienstzimmermonitor (DZM P7).

### Funktionen:

- Grafische Meldungsanzeige in einem Stations- oder Etagenplan
- Rufe können mittels eines sprachfähigen Dienstzimmerterminals entgegengenommen und beantwortet werden
- Mehrbenutzerfähigkeit ist gegeben
- Sichere Benutzeranmeldung mit Passwort
- Verbindungsüberwachung der Browseranwendung durch das Lichtrufsystem optional möglich
- Bedienung per Maus

### Voraussetzungen:

- Google Chrome ab Version 10 (Empfehlung)
- Mozilla Firefox ab Version 10
- Grundrisszeichnungen sind vom Kunden selber zu stellen und können über den Browser hochgeladen werden.
  - Die Grafiken sollten im Querformat vorliegen
  - Mindestens 600px breit und 400px hoch sein
  - Möglichst aber ca. 1920px x 1200px